

**ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ  
ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ  
«Здоровье»**

**МОДЕЛЬ ЕВ9332**



**Руководство по эксплуатации**

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ

Весы бытовые электронные ЕВ9332 предназначены для определения веса тела человека в домашних условиях в пределах 200 кг с точностью 100 г.

Весы просты и удобны в использовании, надёжны, работают от батарейки 3В.

## 2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 2.1 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Осторожно распакуйте весы. В комплект поставки входят:

- |   |     |     |
|---|-----|-----|
| 2.1.1. Весы бытовые, шт.                | - 1 |     |
| 2.1.2. Руководство по эксплуатации, шт. |     | - 1 |
| 2.1.3. Упаковочная коробка, шт.         |     | - 1 |

### 2.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие условия эксплуатации :
- Весы должны быть установлены на ровную, твёрдую, неподвижную поверхность.
- Не устанавливайте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- Содержите весы в чистоте и оберегайте от ударов.
- Не устанавливайте весы вблизи электронных приборов во избежание электропомех.
- Строго соблюдайте меры предосторожности по работе с весами, приведённые ниже, во избежание выхода из строя весов.

### 2.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- 2.3.1. Пользуйтесь весами только в соответствии с данной инструкцией.
- 2.3.2. Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть весы и провести техническое обслуживание или устранить неисправность самостоятельно.
- 2.3.3. По всем вопросам связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом весов обращайтесь только к квалифицированным мастерам, имеющим право обслуживания данный тип весов. В противном случае вы лишаетесь гарантий.

## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 3.1 Аккуратно встаньте на платформу весов, весы включатся автоматически, стойте без движения, через несколько секунд индикатор покажет Ваш вес.
- 3.2 Сойдите с платформы, и весы выключатся автоматически.
- 3.3 Выбирайте единицу измерения КГ переключателем на обратной стороне весов. Сообщения индикатора:

Сообщение	Значение	Действия
Err	Перегрузка, вес > 200 кг.	Используйте весы до 200 кг, не выше..
Lo	Батарейка разряжена.	Замените батарейку.
C	Ошибка взвешивания.	Сойдите с весов и встаньте еще раз.

#### **4. ГАРАНТИИ.**

- 4.1. Гарантийный и послегарантийный ремонт весов производят специализированные предприятия, уполномоченные Заявителем на проведение такого ремонта.
- 4.2. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и ремонтом весов, обращайтесь в фирму, продавшую весы.
- 4.3 Гарантийный срок на весы бытовые составляет 6 месяцев с даты продажи.

#### **ЗАЯВИТЕЛЬ В РОССИИ:**

**ООО "МИДЛ С"**


#### **5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**

Весы электронные ЕВ9332 признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

Приемку произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

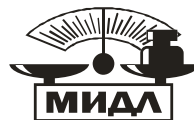

## **ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ**

- ***КАССОВЫЕ АППАРАТЫ***
- ***ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ***
- ***ХОЛОДИЛЬНОЕ и ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ***
- ***БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ***
- ***КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ***
- ***КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ***
- ***ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"***

Компания "Мир Весов"

115409, Москва, ул. Москворечье 47,

корп. 2

Тел./ факс: (495) 921-44-57

<http://www.mirvesov.ru>

E-mail: [mv@mirvesov.ru](mailto:mv@mirvesov.ru)